

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ADC-08 ASEPTISILLA SILLA PORTABLE



Aseptico

*P.O. Box 1548 • Woodinville, WA 98072-1548
1-800-426-5913 • 425-487-3157 • Fax: 360-668-8722
email: info@aseptico.com • Internet: www.aseptico.com*

CONTENIDO

Introducción3
 Propósito3
 Características del funcionamiento3
 Artículos equipados3
Instrucciones de la Operación4
 Instalación de la silla4
 Desarmado de la silla4
Limpieza y Mantenimiento4
Diagrama de Partes6
Lista de Partes7

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1 - Posición de soporte trasero4
Figura 2 - Ajuste de la estructura en el canal de tope4
Figura 3 - Ajuste de altura de patas4
Figura 4 - Diagrama de partes6

DESCRIPCION:

La versatilidad en el tándem con la transportabilidad hace el Aséptico ADC-08 AseptiStool es el taburete perfecto disponible para el profesional como un compañero al ADC-01 Aseptisilla. El taburete de operador ADC-08 es diseñado para la comodidad, la seguridad, y la transportabilidad. Por favor lea las instrucciones proporcionadas debajo para recibir lo mejor y el servicio más largo de su equipo Aséptico.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO:

Dimensiones

Silla – Doblado 19” x 20” x 8.5”

Extendida 22” x 20”x (altura máxima 32” altura mínima 29”)

Estuche para guardar silla: 19” x 21” x 9”

Peso

Una (1) sola silla: 14 lbs

Una (1) silla y el estuche para guardarla: 16.5 lbs.

Capacidad de carga máxima: aproximadamente 300 lbs

Rango de Posición

Altura mínima del asiento: 19”

Altura máxima del asiento: 22”

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

Un (1) ADC-08 Silla dental portable.

Un (1) Estuche suave para guardar con asas.

Un (1) Manual de operación y mantenimiento.

ARMANDO EL TABURETE:

1. Quitar el taburete de su maletín y girar el apoyo trasero a la posición derecha.
2. Poner el taburete ADC-08 de cabeza y elevar la superficie plana tal como una tabla o una tapa contraria. El armazón de las patas tipo tijera se enmarcan de modo que se crucen las líneas del miembro en la parte trasera del taburete por debajo. Inserte el miembro cruzado del marco en el canal y empuje firmemente en el lugar. Pase la correa de retención entre la parte superior del travesaño y fíjalo en su lugar. Asegúrese de que la correa segura el travesaño firmemente en el canal de parada.
3. Extienda las patas a la altura apropiada sacándolas y accionando su extensión telescópicamente del marco. Las patas con extensión telescópica son marcadas con un punto rojo que indican la altura. Jale la pata girándola hasta que el punto rojo sea expuesto con el agujero en el tubo. El perno con resorte del ajuste deberá entonces saltar a través del agujero de la pata. Repita con todas las patas.
4. Una vez que usted ha puesto las patas a la altura apropiada, gire el taburete ADC-08 y ponga sobre una superficie plana para su empleo.

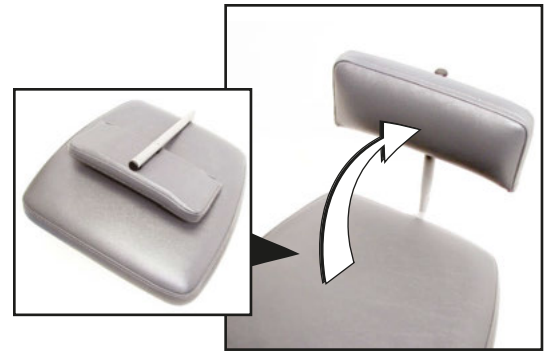


Figura 1 - Posición de soporte trasero

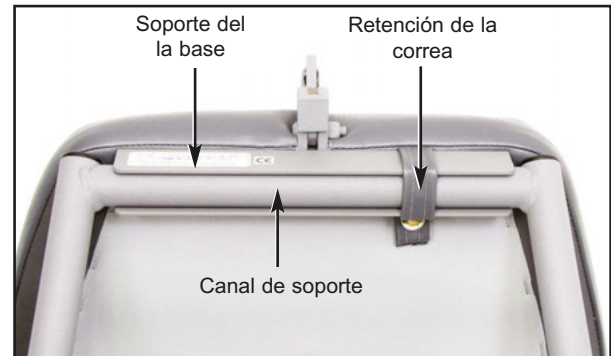


Figure 2 - Securing Leg Frame

ADVERTENCIA

ASEGÚRESE QUE TODAS LAS PATAS SON AMPLIADAS A LA MISMA ALTURA. AJUSTANDO EL PERNO.

NUNCA SE SIÉNTE SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE SIEMPRE SIÉNTESE EN EL CENTRO DEL ASIENTO.



PLEGANDO EL TABURETE:

Invierta el procedimiento de estructuración para plegar el taburete para el embalaje. Pliegue el taburete, quite el seguro de ajuste del perno empujando y girando la pata a 90 grados empujándola dentro del armazón. Esto evitará que las piernas se paren en cada intervalo de ajuste.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Aún que la lejía, cuando se diluye a <10%, podría ser utilizado, no se recomienda. El uso de una barrera y soluciones suaves de limpieza son recomendados como el enfoque principal de asepsia en la silla y taburete tapizado en lugar de confiar en los productos químicos. El uso de barreras amplía grandemente la vida de la tapicería usado en silla y el taburete y puede ser sustituido entre los pacientes.



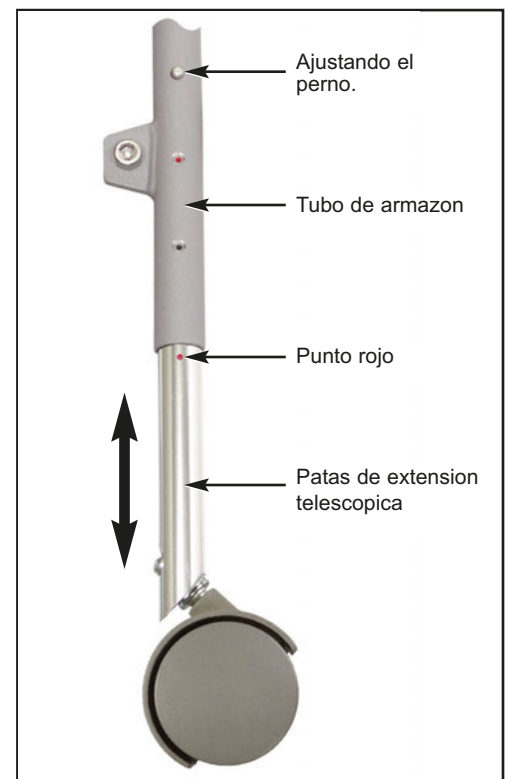


Figure 3 - Leg Height Adjustment

NOTAS

Lined area for notes with horizontal dashed lines.

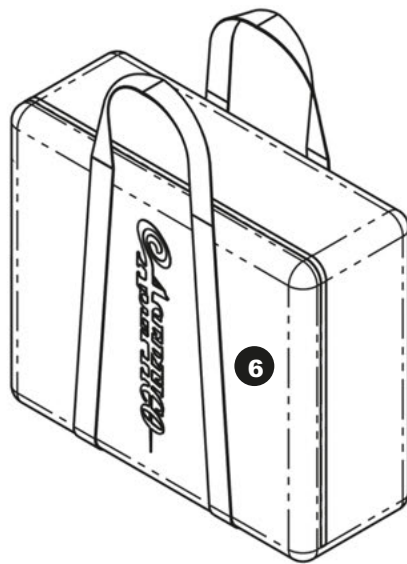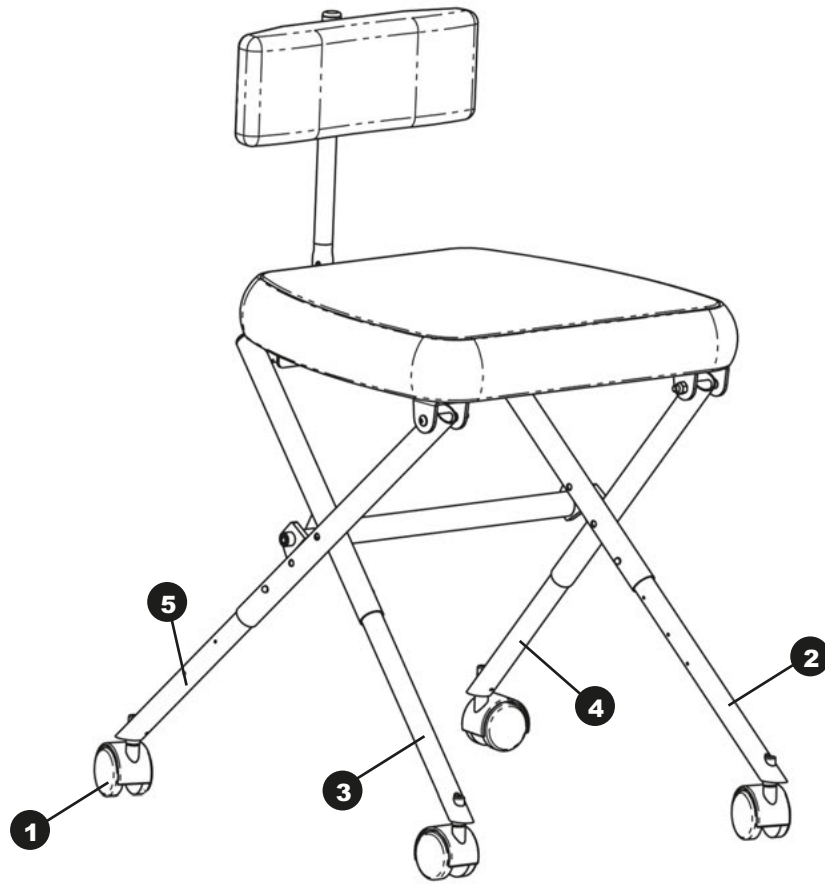

LISTA DE PARTES

	Descripción	Numero (No.)	Cantidad
1	Rueda dual de 2"	730210	4
2	Ajuste interior de montaje de pata izquierda	330265	1
3	Ajuste interior de montaje de pata derecha	330266	1
4	Ajuste exterior de montaje de la pata izquierda	330267	1
5	Ajuste exterior de montaje de la pata derecha	330268	1
6	Estuche gris para guardar silla	410093	1

GARANTIA

Aséptico garantiza sus productos contra defectos en material o en manufactura por un período de dos (2) años, a partir de la fecha de la factura original. Algunas piezas de mano son garantizadas por un año bajo las mismas condiciones. Otras piezas de mano y componentes consumibles, tales como turbinas de aire y bombillas, se cubren por períodos más cortos de garantía, o no tienen ninguna garantía. La única obligación de Aséptico bajo garantía del producto es (en su opción y a juicio único) reparar o sustituir cualquier componente o producto defectuoso entero o en partes. Aséptico será el único árbitro de tal decisión.

En caso de un supuesto defecto bajo garantía, el comprador deberá notificar oportunamente al departamento de servicio a clientes de Aséptico. Servicio a cliente proporcionará instrucciones, usualmente indicando que el producto sea devuelto para servicio. El envío a Aséptico y el costo derivado de este será siempre la responsabilidad del comprador.

El maltrato accidental, instalación inadecuada, o la falta de mantenimiento especializado anulará la garantía.

Aséptico no asume, bajo esta garantía, ningún riesgo o responsabilidad derivado del uso clínico de sus productos, sea o no que tal uso involucre el empleo coincidente de productos fabricados por otros.

